

Меры безопасности

1. Условия использования массажера

- Не используйте массажер в условиях высокой влажности или пыльной среде, так как это может привести к поломке или поражению электротоком

- Не используйте массажер в ванной комнате

- Не используйте массажер в постели

- Не ставьте и не храните массажер там, где он может упасть в воду

- Избегайте контакта массажера с водой и держите его в безопасном месте

- Не садитесь на массажер

- Не подвергайте массажер нагреву или попаданию прямых солнечных лучей

2. Ограничения использования

Если у вас есть проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категориям людей указанных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:

- При проблемах с сердцем

- Во время беременности

- При любых проблемах, связанных со здоровьем

3. Не используйте массажер

- Более 15 минут одновременно

- Массажер не должен использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра взрослых или опекуна

- Не используйте массажер в сонном состоянии

- Если тканевое покрытие массажера разорвано

- Если на массажер случайно пролита вода

- Если во время массажа Вы почувствовали дискомфорт или сильную боль

- При любой неисправности или ненормальной работе массажера

- Если произошло короткое замыкание

4. Важные предупреждения

- Отключите массажер от сети, если он не используется

- Не используйте с массажером аксессуары, не рекомендованные OGAWA.

- Не используйте массажер, если у него поврежден шнур или вилка питания. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр OGAWA для ремонта.

- Не роняйте массажер и не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия.

- Осторожно используйте функцию подогрева. Бесконтрольное использование подогрева детьми и недееспособными лицами может быть опасно.

- Не поднимайте и не переносите массажер держась за шнур питания.

- Данный массажер предназначен только для персонального использования и не должен использоваться для коммерческих целей.

- Не накрывайте массажер во время его работы.

- Не допускайте чрезмерного давления на массажер и избегайте соприкосновения с острыми предметами, что может повредить поверхность.

5. Предупреждения

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием массажера для обеспечения безопасного и правильного использования.

- Массажер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии опыта и знаний о его правильном использовании. В этом случае обязательно присутствие взрослых или опекунов.

- Бесперывное использование массажера может привести к его перегреву и сокращению срока службы. Если это произошло, немедленно прекратите использование массажера и дайте ему остыть перед началом работы.

- Лицам, проходящим курс лечения, нужно проконсультироваться с врачом перед применением массажера. Пожалуйста, не используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо.

- Если массажер используется в холодном помещении, не допускайте резкого повышения температуры в помещении.

- Если массажер хранился в холодном месте и был внесен в теплое помещение, необходимо подождать три часа перед началом его использования.

- Не разбирайте массажер. Прикосновение к внутренним компонентам может привести к неисправности или поражению электрическим током.

- Не подключайте и не отключайте кабель питания от электрической розетки мокрыми руками.

Условия гарантии

1. Данная гарантия не подлежит передаче.

2. Настоящая гарантия действительна только если массажер был куплен у официального дистрибьютора или дилера OGAWA.

3. Предъявление доказательства покупки (оригинал платежной квитанции, накладной или чека) является обязательным для всех гарантийных ремонтов.

4. Все подразумеваемые гарантии ограничены общей продолжительностью 2 года с момента покупки.

5. Повреждения массажера, возникшие в результате неправильного его использования, неправильной перевозки или хранения, а также внесения изменений в конструкцию и неквалифицированного ремонта не распространяются на эту гарантию.


6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не входящие в состав массажера.

7. Гарантия не действует на массажеры используемые для аренды, офисной, коммерческой, выставочной эксплуатации или для других целей, кроме домашнего использования.

8. Все услуги, предусмотренные настоящей гарантией должны быть выполнены только с согласования с OGAWA и осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

9. Если запасные части отсутствуют, Огава оставляет право заменить товар на новый, вместо ремонта.

Панель управления

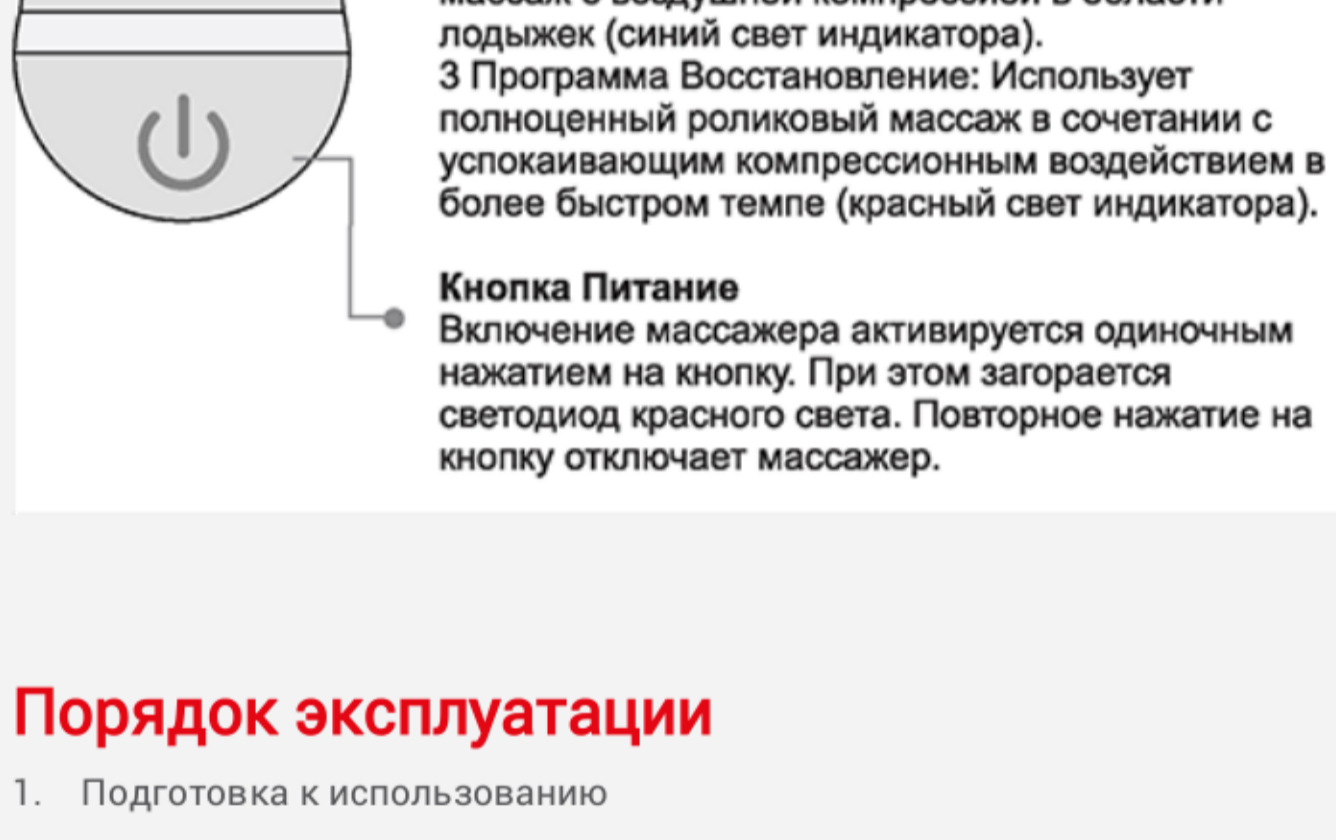

Порядок эксплуатации

1. Подготовка к использованию

- 1) Перед использованием:

- Достаньте массажер из упаковки.

- Внимательно прочитайте инструкцию по использованию.

- Подключите вилку к сетевой розетке, после чего массажер готов к использованию.

- 2) Использование массажера:

- Аккуратно поместите ноги в ниши для массажа, чтобы начать сеанс.

2. Порядок эксплуатации

- Нажмите кнопку "Питание" один раз. При этом прозвучит один короткий сигнал и массажер войдет в режим ожидания. Повторное нажатие кнопки "Питание" активирует 1 Автопрограмму Релакс (Зеленый индикатор). При этом по умолчанию включена функция ионизации (Синий индикатор); включена функция подогрева (Красный индикатор); интенсивность низкая (Зеленый индикатор). Таймер массажа установлен на 15 минут.

- С помощью кнопки Ионизация можно включать и выключать этот режим самостоятельно. При включении функции загорается синий светодиод. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом.

- С помощью кнопки Подогрев можно включать и выключать этот режим самостоятельно. При включении функции загорается красный светодиод. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом.

- С помощью кнопки Интенсивность можно менять 3 интенсивности компрессии самостоятельно. Каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом и изменением цвета кнопки. Зеленый светодиод означает слабую интенсивность. Синий светодиод означает среднюю интенсивность. Красный светодиод означает высокую интенсивность.

- С помощью кнопки выбора автопрограмм можно самостоятельно менять программы массажа. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом и изменением цвета кнопки. Зеленый светодиод означает режим 1, синий светодиод Режим 2, красный светодиод означает Режим 3.

- После окончания 15 минут, массажер входит в режим ожидания и все функции отключаются.

- Для прекращения массажа во время сеанса, повторно нажмите кнопку "Питание" и массажер сразу перейдет в режим ожидания.

3. Выключение массажера

Для выключения массажера, переведите его в режим ожидания и затем обесточьте его, вынув вилку из розетки.

Порядок чистки и хранения

Хранение

- Для хранения массажера поместите его в коробку и храните в безопасном, сухом и прохладном месте.

- Избегайте контакта поверхности массажера с острыми краями или острыми предметами, которые могут повредить или проткнуть его поверхность. При хранении сматывайте шнур питания в области днища массажера.

- Не поднимайте массажер держась за сетевой шнур.

Чистка

- Не погружайте массажер в любую жидкость во время чистки.

- Отключите массажер и дайте ему остыть перед чисткой.

- Очищайте его только мягкой и слегка влажной губкой.

- Никогда не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на массажер. Это может привести к поломке массажера.

- Избегайте использования абразивных чистящих средств, щеток, бензина, керосина, жидкости для чистки стекла, полировки мебели или растворителя для краски при чистке.

- Не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. Для обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром Огава.

Внимание

- Оберегайте тканевые чехлы от разрыва.

- Используйте массажер осторожно, чтобы не повредить его, а также избежать травм.

Порядок обслуживания

- По возможности не выбрасывайте защитную пленку логотипа, чтобы защитить его металлическое покрытие.

- Держите массажер в чистоте и хранить его вдали от влаги.

- Если массажер не используется в течение длительного времени, храните его в защитном чехле (пожалуйста, купите его самостоятельно). Это позволит защитить массажер от пыли.