



Omni Tap

OT-1000

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая принесет Вам только положительные эмоции от использования. Вся продукция ОТО уже прошла проверку и отвечает требованиям безопасности и качества для его использования в домашних условиях. Пожалуйста перед использованием массажера внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуатировать.

Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании ОТО.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	1
Составные части.....	2
Описание функций	3
Порядок эксплуатации.....	4
Устранение проблем	5
Хранение и обслуживание.....	6
Спецификация	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следующим лицам требуется проконсультироваться со своим врачом перед использованием массажера.

- Если у вас встроен кардиостимулятор или аналогичное медицинское оборудование
- Если Вы страдаете от болезней сердца
- Если у вас искривление позвоночника
- Если у вас слабые или переломанные кости, особенно кости спины
- В послеоперационный период
- Во время беременности или сразу после родов
- Если у вас злокачественная опухоль
- Если у вас остеопороз
- Если у вас есть проблемы с циркуляцией крови или тромбоз
- Если у вас есть кожные инфекции
- Если вы проходите курс лечения или медицинское обследование
- Если у вас имеются физические аномалии
- Если у вас были травмы или заболевания спины и позвоночника, в результате несчастного случая или болезни.

2. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь массажера.

3. Вода и электричество опасное сочетание. Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью (саунах, ванной комнате или около бассейна).

4. Убедитесь, что вилка электропитания надежно вставлена в розетку, чтобы уменьшить риск короткого замыкания и возгорания.

5. Если вилка, сетевой шнур или сам массажер повреждены, не используйте его.

6. Во избежании поражения электрическим током, не ремонтируйте массажер самостоятельно.

7. Массажер не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без присмотра или руководства лиц, ответственных за их безопасность.

8. В целях безопасности, всегда обращайтесь в сервисную службу ОТО за консультацией и ремонтом если массажер или провод питания сломаны. Не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно, иначе ваша гарантия будет недействительна.

9. Если сетевая вилка, провод питания или массажер неисправны, пожалуйста прекратите его использование. Выключите массажер, отсоедините его от питания и немедленно обратитесь за консультацией в сервис ОТО или к его авторизованному дилеру.

10. Никогда не трогайте вилку сетевого шнура мокрыми руками.

11. Не оставляйте массажер без присмотра, если он используется в помещении где присутствуют дети или инвалиды.

12. Не наносите медицинские или косметические крема или лосьоны на поверхность массажера или на Вашу кожу перед или во время использования массажера.

13. Используйте массажер только по назначению, как указано в инструкции.

14. Не пытайтесь стоять или сидеть на массажере для предотвращения поломок, травм или других неисправностей.

15. Всегда содержите массажер в чистоте и не вставляйте внутрь посторонние предметы. Не ставьте на массажер посторонние предметы.

16. Не пытайтесь передвигать массажер, потянув его за шнур питания.

17. Если Вы обнаружили разрыв или повреждение обивки массажера, свяжитесь с Сервисной службой ОТО для консультации.

18. Этот массажер предназначен только для домашнего использования.


19. Если Вы испытываете дискомфорт или боль во время использования массажера, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу за консультацией.

20. Никогда не подвергайте массажу опухшие или воспаленные части тела.

21. Этот массажер не является медицинским оборудованием и не может полностью заменить полноценного медицинского лечения.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Массажные головки
2. Панель управления
3. Клипс застежка ручек
4. Ручки ремни
5. Розетка питания (скрытая)

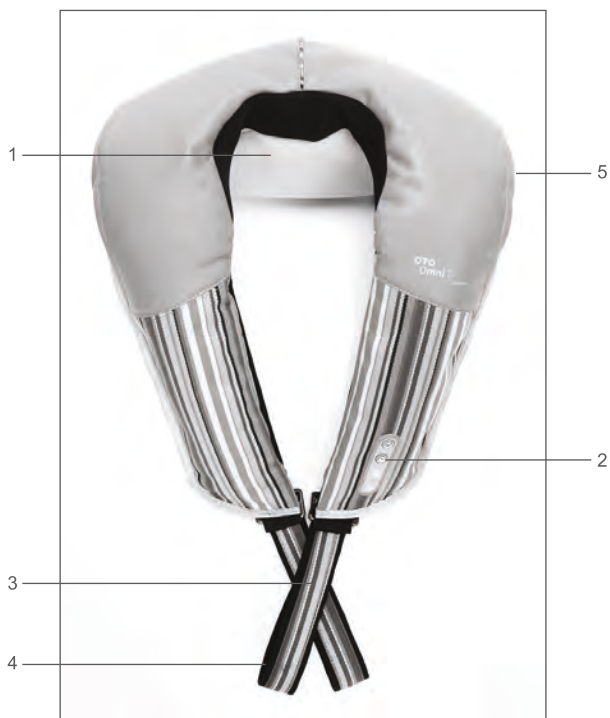

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

А. Кнопка включения / выключения

Нажмите кнопку один раз, чтобы начать по умолчанию автоматическую программу.
Один звуковой сигнал указывает на то, что массажер включен;
Три коротких звуковых сигнала указывает на то, что питание выключено.

В. Кнопка включения автоматических программ Auto


Нажмите эту кнопку чтобы выбрать одну из 3 различных автоматических программ.

С. Кнопка увеличения интенсивности массажа

Нажмите эту кнопку чтобы увеличить интенсивность в диапазоне от 1 до 10 уровней.

Д. Кнопка уменьшения интенсивности массажа

Нажмите эту кнопку чтобы уменьшить интенсивность.

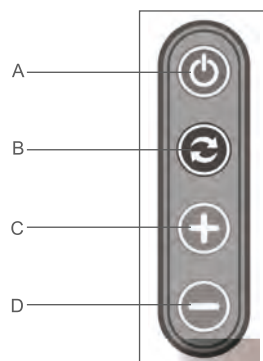

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разместите массажер на плечах (см. рисунок).
2. Подключите кабель питания к электрической розетке.
3. После подключения массажера, прозвучит серия звуковых сигналов, указывающих что массажер находится в режиме ожидания.
4. Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы начать по умолчанию автоматическую программу массажа (7 минут).
5. Вы можете настроить интенсивность массажа нажатием кнопок "+" или "-" в процессе проведения массажа.
6. Нажмите кнопку выбора автоматических программ для выбора предпочтительной программы. Нажмите один раз для выбора программы "Массаж Плеч"; дважды для выбора программы "Массаж спины"; трижды для выбора программы "Массаж плеч и спины". Каждая программа длится 7 минут.
7. Нажмите кнопки "+" или "-" для выбора одного из 10 уровней интенсивности массажа.
8. Потяните за ручки ремни для регулировки положения массажа.
9. Закрепите ручки вместе на застежку, чтобы зафиксировать массажер.



УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если Вы не в состоянии решить проблему с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста свяжитесь с сервисным центром ОТО или его уполномоченным представителем.

Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите массажер и отсоедините вилку из сети.
2. Подождите в течении 60 минут.
3. Подключите массажер к электрической сети и перезапустите его.
4. Если проблема не устранилась, свяжитесь с сервисным центром ОТО.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к питанию правильно.	Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера напряжению питания местной электросети.
	Массажер только что закончил 7 минутный сеанс массажа и автоматически переключился в режим ожидания.	Если Вы хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку Power (ВКЛ/ВЫКЛ).
	Возможно Вы использовали массажер без перерыва в течении 45 минут из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова.
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка.	Уберите нагрузку с массажера и снова начните массаж.
Массаже сильно нагрелся	Массажер непрерывно работал без перерыва более 45 минут.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова.
Во время работы массажера издается шум	Этот звук вызван работой механизма массажера.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажер неисправен.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон для очистки массажера.

Не погружайте массажер в воду.

1. Выньте вилку из розетки перед чисткой.
2. Очистите массажер сухой тканью.
3. Не используйте влажную ткань или чистящее средство.

Хранение

1. Выньте вилку из розетки.
2. Храните массажер в прохладном и сухом месте, вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите тяжелые предметы на массажер.

Если сетевая вилка, провод питания или массажер неисправны, пожалуйста прекратите его использование. Выключите массажер, отсоедините его от питания и немедленно обратитесь за консультацией в сервис ОТО или к его авторизованному дилеру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Технические характеристики
Наименование	ОТО Omni Tap
Модель	ОТ-1000
Тип	Массажер шеи и плеч
Входное напряжение питания	АС ~ 220-240 В, 50 / 60 Гц
Максимальная мощность	40 Вт
Габаритные размеры массажера	45(Д) x 60(Ш) x 8(В) см
Габаритные размеры в упаковке	42(Д) x 11(Ш) x 28(В) см
Автоматический таймер	7 минут
Вес (Нетто / Брутто)	4,1 / 5,1 кг
Сертификат соответствия РСТ	РОСС SG.АГ93.В05238
Сертификат качества ISO 9001:2008	

OTO

www.otobodycare.ru