

Меры безопасности

а) Условия использования

- Не используйте массажную накидку в помещении с высокой влажностью или повышенным уровнем содержания пыли, это может привести к выходу ее из строя или поражению электрическим током.
- Не используйте накидку в ванной комнате.
- Не ставьте и не храните накидку там, где она может быть подвергнута воздействию воды. Храните ее в сухом безопасном месте.
- Не подвергайте накидку воздействию нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.

б) Ограничения по использованию

Если у Вас имеются проблемы со здоровьем или Вы относитесь к одной из нижеперечисленных групп, проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием массажной накидки.

- Если Вы страдаете от болезней сердца
- В период беременности
- Если Вы обеспокоены своим здоровьем.

в) Противопоказания к использованию

- Если время использования превышает 15 минут за сеанс.
- Массажная накидка не должна использоваться детьми или инвалидами без присмотра взрослых.
- Не используйте накидку перед сном.
- Если тканевое покрытие накидки разорвано.
- Если на накидку пролилась жидкость.
- Если во время массажа ощущается сильная боль.
- Если видя массажа неисправна или работает не правильно.
- Если во время работы накидки произошло короткое замыкание.

г) Важные предупреждения

- Отключайте накидку от сети, если она не используется.
- Не используйте дополнительное оборудование, не рекомендованное OGAWA.
- Никогда не используйте накидку, если сетевой шнур или вилка повреждены. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр OGAWA для определения неисправности и ремонта.
- Никогда не роняйте и не пытайтесь засунуть посторонние предметы в вентиляционные отверстия массажной накидки.
- Во время работы поверхность массажной накидки нагревается. Если у Вас имеются нечувствительные участки кожи или плохое кровообращение, остерегайтесь перегрева. Неконтролируемое использование тепловой функции детьми или недееспособными лицами может быть опасным.
- Не поднимайте и не переносите накидку с подключенным к сети шнуром питания.
- Накидка предназначена только для домашнего использования..
- Не накрывайте массажную накидку во время работы.
- Не допускайте чрезмерного давления или резких сгибаний корпуса массажной накидки.


д) Указания по технике безопасности

Пожалуйста, заранее прочитайте эти указания по безопасности.

- Массажная накидка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с психическими расстройствами, или лицами, которым не хватает опыта и знаний о накидке. В этом случае массаж должен выполняться в присутствии лиц, ответственных за их безопасность.
- Непрерывное использование массажной накидки может привести к ее перегреву и выключению. Если это произошло, немедленно прекратите массаж и дайте накидке остыть.
- Во время использования допускается некоторый уровень шума, который издается из-за существующей вибрации.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием накидки, если Вы находитесь под действием лекарств или болезни.
- Не используйте накидку, если Вы плохо себя чувствуете.
- Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, где используется массажная накидка.
- Если накидка хранилась в прохладном или теплом помещении, сделайте паузу 3 часа перед началом ее использования.
- Не разбирайте накидку. Это может привести к ее неисправности или поражению электрическим током.
- Не касайтесь кабеля питания мокрыми руками.
- Не используйте массажную накидку, если электрическая розетка неисправна или повреждена.

Пульт управления

Назначение кнопок

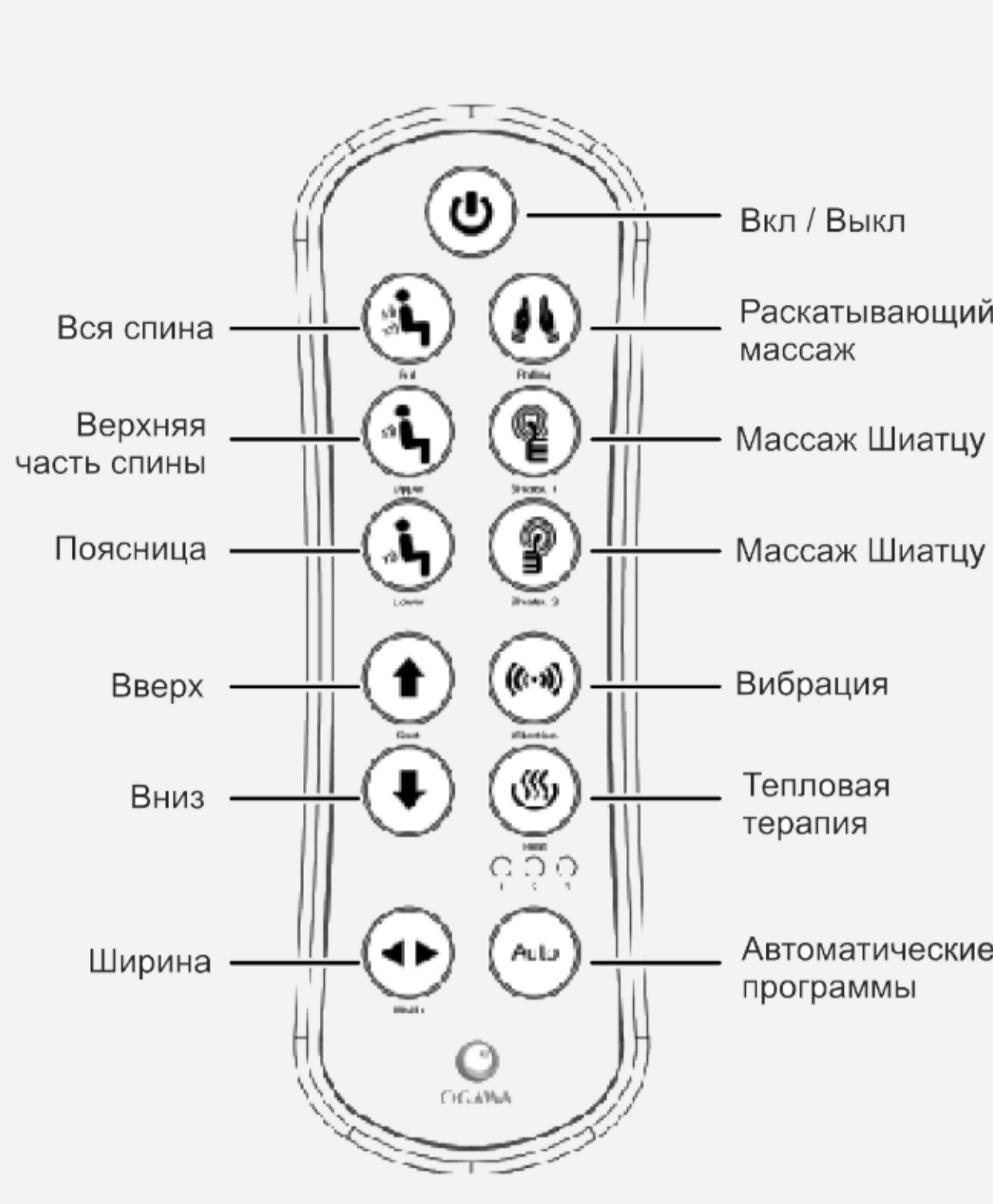

Подготовка к использованию

1. Перед использованием массажной накидки

- Массажная накидка имеет предохранительный винт, расположенный на задней стороне спинки, который защищает массажный механизм во время транспортировки. Он должен быть вывернут перед использованием.
- Для этого используйте прилагаемый в комплекте гаечный ключ.

2. Размещение массажной накидки

- Массажная накидка оснащена сзади ремнем, который позволяет пользователю жестко крепить ее на стуле или кресле.
- Разместите накидку на кресле, соединив два конца крепёжных ремней за спинкой кресла и закрепив их на липучке.

Порядок эксплуатации

1. Вкл/выкл

Вставьте вилку в розетку. Включите питание. Если массажные ролики спины были в нижнем положении, кнопка [Вкл / Выкл] начнет мигать и ролики вернуться в исходное положение. Для включения массажа, выберите одну из автоматических программ. Сеанс массажа рассчитан на 15 минут. После этого все функции будут остановлены. Нажмите кнопку [Вкл / Выкл] еще раз для полного отключения массажа. При этом все индикаторы на пульте погаснут и кнопки перестанут работать. Массажные ролики автоматически вернуться в исходное положение.

2. Раскатывающий [Rolling] массаж

Нажмите кнопку [Rolling] для включения раскатывающего массажа, который будет выполняться вдоль всей спины с функцией прогрева. Режим массажа [Вся спина] включается по умолчанию для режима [Rolling], но Вы также можете выбрать режимы [Верх спины] или [Поясница]. Нажмите KHonKy[Rolling] еще раз для остановки функции раскатывающего массажа и прогрева.

3. Разминающий массаж Шиатцу 1 [Shiatsu 1]

Нажмите кнопку [Shiatsu 1] для включения разминающего массажа для всей спины с функцией прогрева. Нажмите KHonKy[Shiatsu 1] еще раз для остановки функции разминающего массажа и прогрева.

4. Разминающий массаж Шиатцу 2 [Shiatsu 2]

Нажмите кнопку [Shiatsu 2] для включения разминающего массажа для всей спины с функцией прогрева. Нажмите KHonKy[Shiatsu 2] еще раз для остановки функции разминающего массажа и прогрева.

5. Вверх / Вниз [Spot Up] / [Spot Down]

Кнопки [Spot Up] / [Spot Down] обеспечивают перемещение роликов в режиме массажа Шиатцу для массажа отдельно выбранной части спины. При нажатии кнопки [Spot Up] массажные ролики двинутся вверх. При отпускании [Spot Up] передвижение прекращается. При нажатии кнопки [Spot Down] ролики движутся вниз соответственно.

6. Ширина [Width]

Активация функции [Ширина] доступна только в режиме [Rolling]. Нажмите кнопку [Width] один раз, и угол размещения роликов будет скорректирован на другую ширину. Нажмите [Width] второй раз, и ширина роликов изменится еще раз. Третье нажатие кнопки [Width] изменит "переменную ширину" роликов в другое положение через секунду. Функция ширины роликов изменяется в циклическом порядке.

7. Тепловая терапия [Heat]

Функция тепловой терапии [Heat] доступна в режимах [Rolling], [Shiatsu 1] и [Shiatsu 2]. Нажмите кнопку [Heat] один раз и массажные ролики начнут нагреваться. Нажмите кнопку еще раз и функция тепловой терапии выключится. В режиме [Auto], функция [Heat] включается автоматически, при выполнении выборочных видов массажа. Вы можете контролировать функцию нагрева вручную с помощью этой кнопки.

8. Вся спина /Верхняя часть /Поясница [Full] /Upper]/Lower]

Данная функция работает только при включенном Шиатцу или Раскатывающем массаже. При включенной кнопке [Shiatsu 1], [Shiatsu 2] или [Вся спина] нажмите кнопку [Full], чтобы включить полный массаж всей спины сверху вниз. Нажмите [Full] еще раз, чтобы остановить эту функцию. При нажатии кнопки [Upper], ролики будут массировать только верхнюю часть спины. При нажатии кнопки [Lower], ролики будут массировать только поясницу.

9. Вибрация [Vibration]

Нажмите кнопку [Vibration], чтобы включить вибрационный массаж в области сиденья. Первое нажатие на кнопку включает вибрацию, а повторное выключает. Режим вибрационного массажа циклически работает в следующей последовательности: в течение 1,5 минуты вибрация работает, после этого выключается на 1 минуту. После этого массажа повторяется снова.

10. Авто [Auto]

Нажмите кнопку [Auto] один раз для включения автоматического режима полного массажа [Auto 1]. Нажмите кнопку [Auto] второй раз для включения автоматического режима полного массажа [Auto 2]. Нажмите кнопку [Auto] третий раз для включения автоматического режима полного массажа [Auto 3]. Нажмите кнопку [Auto] четвертый раз для выключения режима [Auto].

Функциональные возможности

1. Раскатывающий и Шиатцу массаж спины предоставляются в автоматическом режиме для программ Full, Upper и Lower.
2. Функция разминающего Шиатцу массажа имеет возможность настройки точки массажа по индивидуальному желанию пользователя и способствует расслаблению мышц спины.
3. Вибрационный массаж в области сиденья служит для облегчения напряжения мышц нижней части тела.
4. Функция тепловой терапии увеличивает эффект воздействия Шиатцу и Раскатывающего массажа и улучшает кровообращение.
5. Легкий, эргономичный и компактный дизайн.
6. Простой в использовании пульт дистанционного управления.
7. Автоматическое отключение массажа через 15 минут
8. Светодиодные индикаторы выполняемых функций.
9. Может использоваться в автомобиле.

Эффект от использования массажной накидки

1. Снимает мышечные боли
2. Снимает нервное напряжение и стресс
3. Улучшает кровообращение

Окончание работы

Нажмите кнопку [Вкл / Выкл] после использования массажной накидки и она прекратит работу. Массажные ролики вернуться в исходное положение. После этого отключите массажную накидку от электрической сети.

Обслуживание и ремонт

Порядок хранения

- Храните массажер в упаковке или в безопасном, сухом и прохладном месте.
- Храните массажер вдали от острых предметов или заостренных предметов, которые могут порезать или проколоть тканевую поверхность массажной накидки.
- Чтобы избежать поломки, не сгибайте и не обматывайте шнур питания вокруг массажной накидки.
- Не складывайте массажную накидку вместе с адаптером питания.

Порядок чистки

- Во время чистки, избегайте любого контакта накидки с водой или другой жидкостью.
- Отключите накидку и дайте ей остыть перед очисткой.
- Очищайте накидку только мягкой и слегка влажной губкой.
- Держите накидку вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, полироль стекол и мебели или растворитель для краски для очистки накидки.

Важные предупреждения

- Не опирайтесь на роликовый массажный механизм при изменении своего положения тела, чтобы избежать разрывов на тканевой поверхности массажной накидки.
- Не рекомендуется использовать массажную накидку на деревянных поверхностях, так как она может повредить дерево.
- Не допускайте чрезмерного давления на накидку во избежание поломки или получения травм.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажную накидку. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром OGAWA для необходимого ремонта.

Устранение проблем

Эта массажная накидка управляется с помощью встроенного микропроцессора, который восприимчив к скачкам напряжения в пределах +10% и -15%. Вследствии этого, накидка может некорректно работать и иметь следующие неполадки:

Накидка не включается

- Отсутствует электричество в сети. Используйте накидку после его восстановления.
- Снова подключите блок питания.
- Включите переключатель питания на пульте

При включении функции обогрева массажные ролики не загораются и не нагреваются

- Перед нажатием кнопки "Heat" нажмите кнопку "Full" / "Upper" / "Lower" на пульте.

Во время массажа пульт работает, а массажная накидка нет.

- Массажная накидка может перегреться после продолжительного использования. Она должна будет автоматически возобновить свою работоспособность после того как остынет. Пожалуйста, выключите питание и дайте массажной накидке остыть в течение 30 - 50 минут.

Массаж спины не включается

- Снова подключите блок питания.
- Включите переключатель питания на пульте

Не включается вибрация сиденья

- Включите кнопку вибрации "Vibration".
- Включите переключатель питания на пульте

Массаж внезапно остановился

- Внезапно пропало электричество в сети. Используйте накидку после его восстановления.
- Снова подключите блок питания.