

Меры безопасности

I. Среда использования

- Не используйте массажер во влажном или пыльном помещении, так как это может привести к поломке или поражению электрическим током.
- Не используйте массажер в ванной комнате.
- Не используйте массажер на кровати.
- Не устанавливайте и не храните массажер в местах, где он может упасть или попасть в ванну или раковину. Установите его в безопасном месте.
- Не сидите на массажере.
- Не подвергайте массажер воздействию обогревателя или прямых солнечных лучей.

II. Противопоказания к использованию

Если у Вас проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категории людей, указанных ниже, проконсультируйтесь с врачом перед использованием:

- Проблемы с сердцем
- Беременность
- Любые вопросы, касающиеся Вашего здоровья

III. Ограничения по использованию

- Массажер не должен использоваться одновременно более 20 минут.
- Массажер не должен использоваться детьми или инвалидами без присмотра взрослых.
- Если тканевое покрытие массажера порвано.
- Если на массажер попала вода.
- Если во время массажа вы почувствовали себя плохо или ощутили сильную боль.
- В случае возникновения сбоев в работе массажера или других необычных признаков.
- Во время грозы.

IV. Важные предупреждения

- Отключите массажер от розетки, если он не используется.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные Ogawa.
- Никогда не применяйте массажер, если шнур или вилка повреждены. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Ogawa для проверки и ремонта
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия массажера.
- Осторожно относитесь к нагреваемой поверхности массажера. Бесконтрольное использование массажера детьми и недееспособными людьми может быть опасным.
- Не поднимайте и не переносите массажер за шнур питания или любой другой шнур.
- Данный массажер предназначен только для личного пользования, и не может использоваться в профессиональных и коммерческих целях.
- Не накрывайте массажер во время работы.
- Не оказывайте на массажер чрезмерной нагрузки и избегайте контакта с острыми предметами.

Примечание

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием массажера для обеспечения безопасного и правильного его использования.
- Массажер не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, которые не имеют опыта и знаний в обращении с массажером. Они должны использовать массажер под опекой и контролем лиц, ответственных за их безопасность.
- Длительная работа массажера без перерыва может привести к перегреву и сокращению срока его службы. Если это произойдет, прекратите использование и дайте массажеру остыть, прежде чем использовать его снова.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом , прежде чем использовать продукт, если вы находитесь проходит курс лечения. Пожалуйста, не используйте массажер, если вы плохо себя чувствуете.
- Если вы используете массажер в холодном помещении, не повышает резко внутреннюю температуру. Рекомендуется увеличивать температуру до нормального уровня постепенно.
- Если массажер хранился или перевозился при низкой температуре до размещения в теплом помещении, пожалуйста, подождите четыре часа до начала его использования, чтобы получить оптимальный уровень массажа.
- Не разбирайте массажер. Прикосновение к внутренним компонентам может привести к неисправности или поражению электрическим током .
- Не подключайте и не отключайте шнур питания от электрической розетки мокрыми руками .
- Не подключайте массажер к открытой электрической розетке.


Условия Гарантии

1. Данная гарантия не подлежит передаче.
2. Настоящая гарантия действительна только если массажер был приобретен у официального дистрибьютора или дилера Ogawa.
3. Предъявление доказательства покупки (оригинал платежной квитанции, накладной или чека) является обязательным для всех гарантийных ремонтов.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничены в общей продолжительности 2 лет с момента покупки.
5. Повреждения массажера, возникшие в результате неправильного его использования, неправильной перевозки и хранения, а также внесения изменений в конструкцию и неквалифицированного ремонта не распространяются на эту гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не входящие в состав массажера.
7. Гарантия не действует на массажеры используемые для аренды, офисной, коммерческой, выставочной эксплуатации или для других целей, кроме домашнего использования.
8. Все услуги, предусмотренные настоящей гарантией должны быть выполнены только с согласования с Ogawa и осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.
9. Если сломанные части для ремонта невозможно починить или они отсутствуют, OGAWA оставляет за собой право производить замену вместо ремонта.

Составные части и аксессуары

- A) Спинка массажера
- B) Шнур питания
- C) Разминающий роликковый механизм
- D) Сиденье массажера
- E) Пульт управления
- F) Вибрационный мотор
- G) Воздушный

Пульт управления

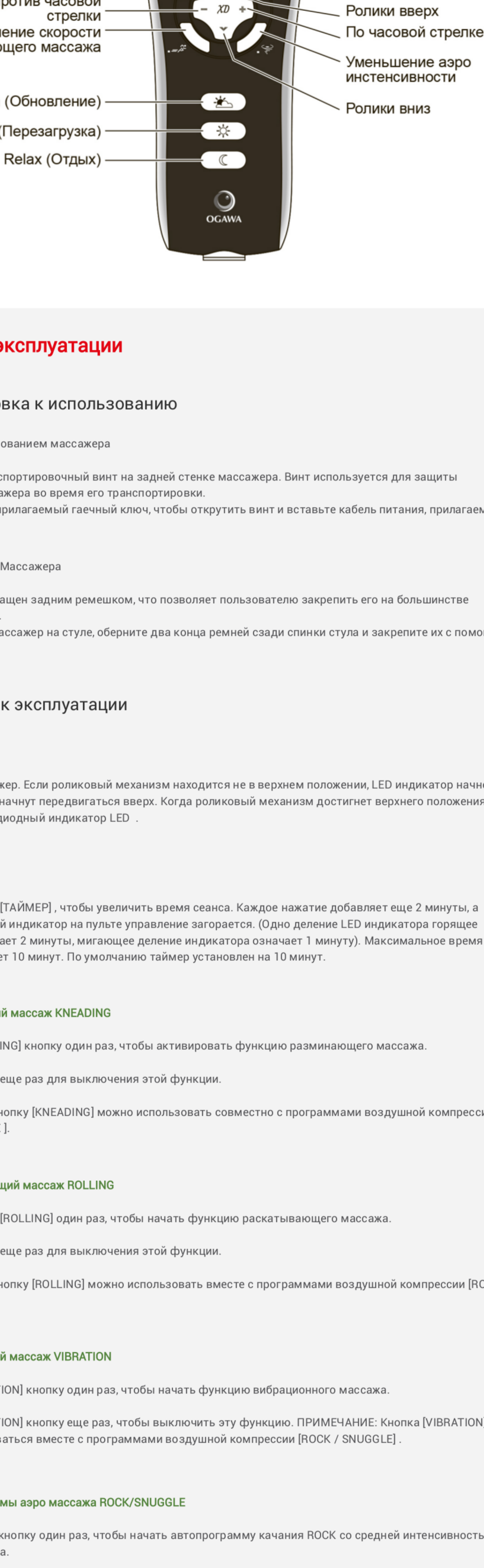

Порядок эксплуатации

I. Подготовка к использованию

1. Перед использованием массажера
 - Найдите транспортировочный винт на задней стенке массажера. Винт используется для защиты механизма массажера во время его транспортировки.
 - Используйте прилагаемый гаечный ключ, чтобы открутить винт и вставить кабель питания, прилагаемый к отверстию.
2. Размещение Массажера
 - Массажер оснащен задним ремешком, что позволяет пользователю закрепить его на большинстве стульев и кресел.
 - Разместите массажер на стуле, оберните два конца ремней сзади спинки стула и закрепите их с помощью липучки.

II. Порядок эксплуатации

1. ПИТАНИЕ

Включите массажер. Если роликковый механизм находится не в верхнем положении, LED индикатор начнет мигать и ролики начнут передвигаться вверх. Когда роликковый механизм достигнет верхнего положения, загорится светодиодный индикатор LED .

2. ТАЙМЕР

Нажмите кнопку [ТАЙМЕР], чтобы увеличить время сеанса. Каждое нажатие добавляет еще 2 минуты, а соответствующий индикатор на пульте управление загорается. (Одно деление LED индикатора горящее постоянно означает 2 минуты, мигающее деление индикатора означает 1 минуту). Максимальное время сеанса составляет 10 минут. По умолчанию таймер установлен на 10 минут.

3. Разминающий массаж KNEADING

Нажмите [KNEADING] кнопку один раз, чтобы активировать функцию разминающего массажа.

Нажмите кнопку еще раз для выключения этой функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопку [KNEADING] можно использовать совместно с программами воздушной компрессии [ROCK / SNUGGLE] .

4. Раскатывающий массаж ROLLING

Нажмите кнопку [ROLLING] один раз, чтобы начать функцию раскатывающего массажа.

Нажмите кнопку еще раз для выключения этой функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопку [ROLLING] можно использовать вместе с программами воздушной компрессии [ROCK / SNUGGLE] .

5. Вибрационный массаж VIBRATION

Нажмите [VIBRATION] кнопку один раз, чтобы начать функцию вибрационного массажа.

Нажмите [VIBRATION] кнопку еще раз, чтобы выключить эту функцию. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Кнопка [VIBRATION] может использоваться вместе с программами воздушной компрессии [ROCK / SNUGGLE] .

6. Автопрограммы аэро массажа ROCK/SNUGGLE

Нажмите [ROCK] кнопку один раз, чтобы начать автопрограмму качания ROCK со средней интенсивностью давления воздуха.

Нажмите кнопку еще раз для выключения программы [ROCK] .

Нажмите [SNUGGLE] кнопку один раз, чтобы начать автопрограмму УЮТ со средней интенсивностью давления воздуха. Нажмите кнопку еще раз для выключения программы [SNUGGLE] .

7. Установка ширины роликов WIDTH

Нажмите [WIDTH] кнопку для регулировки ширины между двумя массажными роликами.

ПРИМЕЧАНИЕ: [WIDTH] кнопка доступна только в режиме активирования функции раскатывающего массажа [ROLLING] и отключения функции [KNEADING] .

8. Регулировка скорости массажа SPEED HIGH/LOW

- 1 [HIGH SPEED] кнопка доступна только при включении режима разминающего массажа [KNEADING] . Нажмите кнопку [HIGH SPEED] чтобы увеличить скорость разминающего массажа.
- 2 [LOW SPEED] кнопка доступна также в режиме разминающего массажа [KNEADING] . Нажмите [LOW SPEED] кнопку, чтобы уменьшить скорость разминающего массажа.

9. Регулировка положения роликов

Нажмите кнопку [UP], чтобы переместить роликковый механизм вверх. Нажмите кнопку [DOWN], чтобы переместить роликковый механизм вниз.

10. Массаж по часовой и против часовой стрелки CLOCKWISE/ANTI-CLOCKWISE

- 1 [+] Кнопка доступна только при активировании разминающего массажа [KNEADING] . Нажмите [+] кнопку, чтобы разминающий массаж работал в направлении по часовой стрелке.
- 2 [-] Кнопка доступна только при активировании разминающего массажа [KNEADING] . Нажмите [-] кнопку, чтобы разминающий массаж работал в направлении против часовой стрелки.

11. Регулировка интенсивности воздушной компрессии AIR INTENSITY HIGH/ LOW

Нажмите кнопку [AIR HIGH], чтобы увеличить интенсивность компрессии воздуха.

Нажмите кнопку [AIR LOW], чтобы уменьшить интенсивность компрессии воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: [AIR INTENSITY] регулируется во всех программах массажа.

12. Автопрограммы массажа REFRESH(ОБНОВЛЕНИЕ)/ RECHARGE(ПЕРЕЗАГРУЗКА)/RELAX(ОТДЫХ)

Нажмите [REFRESH] или [RECHARGE] или [RELAX] кнопку, чтобы начать соответствующую программу. Нажмите еще раз, чтобы остановить программу.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этих программ, пользователь может регулировать только скорость и интенсивность воздушной компрессии.

13. Когда массажер не используется, нажмите [POWER] кнопку.

Не отключайте массажер от сети питания сразу. Пожалуйста, дождитесь, пока роликковый механизм не закончит процесс передвижения в стационарное положение перед отключением питания.

III. Эффект от применения массажера

14. Снимает ломоту и боль в мышцах
15. Снимает напряжение и уменьшает стресс
16. Улучшает кровообращение

IV. После использования

Нажмите кнопку питания после использования массажера. Массажер прекратит работу и массажные ролики вернутся в исходное положение. Отключите массажер от электрической сети.

Порядок хранения и чистки

Хранение

- Поместите массажер в коробку и храните его в безопасном, сухом и прохладном месте. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут повредить или проткнуть поверхность массажера. При хранении сматывайте шнур питания. Не подвешивайте массажер за сетевой шнур.

Чистка

- Не погружайте массажер в любую жидкость во время чистки.
- Отключите массажер и дайте ему остыть перед чисткой.
- Очищайте его только мягкой и слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или любой другой жидкости, которая может попасть внутрь массажера.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств, щеток, бензина, керосина, жидкости для чистки стекол, полировки мебели или растворителя для краски при чистке.
- Избегайте ремонтировать массажер самостоятельно. Для обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с Ogawa.

Внимание

- Оберегайте тканевые чехлы от разрыва.
- Используйте массажер осторожно, чтобы не повредить его, а также избежать травм.

Устранение Проблем в Работе

Микропроцессорная плата массажера подвержена сбоям при скачках напряжения в диапазоне 10% - 15%. В этом случае могут возникнуть следующие проблемы в работе:

Не включается

1. Вставьте вилку в розетку
2. Убедитесь, что шнур питания подключен правильно

Пульт управления работает, а массажер не работает

Возможно массажер сильно нагрелся после длительного использования, что активировало защиту от перегрева. Пожалуйста, отключите питание массажера и дайте ему остыть в течение 30 до 50 минут.

Массажные функции Kneading и Rolling не включаются

1. Выключите и включите питание
2. Заново подключите шнур питания

Массажер внезапно остановился

1. Выключите и включите питание
2. Заново подключите шнур питания