

Примите наши поздравления!

Спасибо за Ваше внимание к нашей продукции и покупке новой модели массажера для глаз Gezatone BEM-III!

Мы желаем Вам приятных процедур! Убедительно просим Вас внимательно изучить информацию, приведенную в данной инструкции перед применением массажера. Если предполагается совместное использование аппарата, то все пользователи должны быть знакомы с инструкцией по эксплуатации.

Гигиеничность и легкий уход позволят использовать данный аппарат всем членам Вашей семьи. Аппарат компактен и удобен в использовании. Он станет Вашим надежным другом на долгие годы.

**ВВЕДЕНИЕ**

Новейшая модель массажера для глаз Gezatone BEM-III, в основе работы которой лежит теория акупунктурного воздействия, обеспечивает вибромассажное, тепловое и компрессионное воздействия в области глаз с использованием современных достижений косметологии. Использование этого массажера приводит к повышению уровня кислорода, улучшению кровотока в параорбитальных тканях, нормализации тонуса сосудов и снятию спазма глазодвигательных мышц. С помощью Gezatone BEM-III Вы восстановите четкость зрения при утомлении глаз, нормализуете сон, повысите работоспособность головного мозга, а также добьетесь замечательного косметического эффекта. Благодаря активному воздействию на ткани кожи разглаживаются морщины в области глаз, уменьшаются отеки, мешки и темные круги под глазами.

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Массажер для глаз Gezatone BEM-III эффективен при появлении нечеткости зрения в результате утомления и усталости глаз, ложной близорукости. Массажер может быть также полезен для профилактики миопии и астигматизма. Способствует уменьшению морщин, темных кругов и мешков под глазами.

Массажер Gezatone BEM-III рекомендован для применения:

Студентам, школьникам и людям, страдающим от близорукости и астигматизма в связи с повышенной нагрузкой на глаза.

Людям, вынужденным проводить много времени за мониторами компьютеров - операторы, бухгалтеры, дизайнеры, инженеры.

Для избавления от мешков, черных кругов и морщин вокруг глаз, вызванных утомлением глаз и недостаточным кровоснабжением.

Людям, страдающим от бессонницы, головной боли и пресбиопии (возрастной дальнозоркости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур:	10...40°C
Допустимая влажность:	не более 80%
Атмосферное давление:	860...1060 кПа
Частота вибрации:	40...100 Гц
Температура нагрева:	30...45°C
Напряжение питания:	DC 6 В (сетевой адаптер или 4 элемента 1.5 В размера АА)
Ток потребления (мощность):	не более 600 мА
Вес:	500 г
Размеры упаковки:	250 x 250 x 80 мм

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

Аппарат состоит из активного модуля (многофункциональной маски) который закрепляется на голове и выносного блока управления на основе микроконтроллера. Питание аппарата осуществляется от батарей или сетевого адаптера.

ВИД НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МАСКУ**ОБЩИЙ ВИД АППАРАТА****КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Аппарат Gezatone BEM-III	1 шт.
Комплект батарей питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ**«Compression» – «Лимфодренажный массаж»**

Переменно-давящее воздействие на параорбитальные области глаз осуществляется с помощью двух пневмоподушек, расположенных на маске. Нагнетание воздуха в пневмоподушечки производится по гибкому шлангу микронасосом, расположенным в блоке управления в соответствии с одной из четырех логических схем.

Нежный массаж позволяет быстро снять напряжение и усталость глаз, восстановить работоспособность глазодвигательных мышц и мышц, отвечающих за четкость зрения.

«Heat» – «Прогревание»

Тепловое воздействие в инфракрасном диапазоне оказывается с помощью гибких линейных нагревательных элементов, расположенных на поверхности пневмоподушек. Аппарат имеет два уровня температуры ИК прогрева – от 30°C до 45°C.

«Vibro Massage» – «Мультичастотный массаж»

Функция вибромассажа реализована с помощью двух микромоторов, расположенных в пластиковом корпусе маски. Пользователь может выбрать любой из 6 возможных вариантов массажа (значения интенсивности/частоты и очередности работы микромоторов).

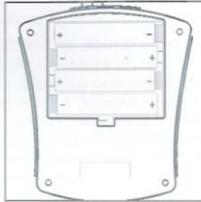
Этот вид массажа является своеобразной тренировкой глазных мышц. При этом повышается их работоспособность и нормализуется тонус. Эти свойства делают массажер эффективным при всех видах близорукости (включая ее профилактику), состояниях утомления и усталости глаз в результате длительной работы перед экраном компьютера, телевизора и т.д., возрастных изменениях (появление дальнозоркости, дистрофические изменения на сетчатке).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

«Compression» + «Heat» – Лимфодренажный массаж с прогреванием
 «Compression» + «Vibro Massage» – Лимфодренажный и мультичастотный массажи
 «Vibro Massage» + «Heat» – Мультичастотный массаж с прогреванием

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ**Установка батарей питания**

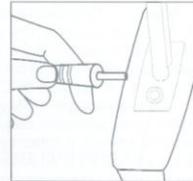
Откройте крышку отсека питания, расположенную на нижней стороне блока управления. Установите четыре щелочных (алкалиновых) элемента питания 1.5 В типа AA в соответствии с указанной полярностью. Закройте крышку отсека питания.

**Подключение сетевого адаптера**

При использовании для питания аппарата сетевого адаптера убедитесь, что в аппарате нет установленных ранее батарей. В противном случае увлеките их.

Проверьте, что адаптер имеет необходимые выходные нагрузочные параметры и соответствующую полярность разъема для подключения.

Замечание: Сетевой адаптер не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно. Не рекомендуется использовать с аппаратом сетевые адаптеры от сторонних производителей.

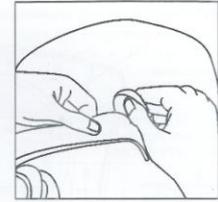
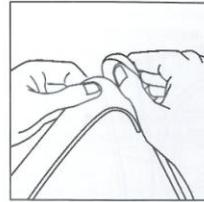
**Крепление маски на голове**

Разъедините концы эластичного ремня и приложите многофункциональную маску к лицу. Заведите концы за голову и подберите такое натяжение ремня, при котором маска массажера зафиксирована на лице плотно, но комфортно. Массажер не должен располагаться слишком свободно, но и не должен оказывать сильное неприятное давление на область глаз.

Замечание: Перед использованием массажера рекомендуется очистить лицо от декоративной косметики и кожного сала.

При правильной установке выемка маски для носа должна располагаться точно на переносице. В этом случае воздействие массажера будет наиболее комфортным.

Внимание! Запрещается включать аппарат, если маска-очки не установлены на голову.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Острые воспалительные заболевания глаз, глаукома, катаракта. Другие не указанные серьезные заболевания глаз.

- Обострение тяжелых хронических заболеваний.
- Гипотонические состояния.
- Острые инфекционные заболевания.
- При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача.
- После травмы или операции на глазах применение массажера разрешается только при наличии разрешения врача.

ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

1. Для включения аппарата кратковременно нажмите кнопку «ON/OFF». По умолчанию активизируется автоматический режим работы с программным перебором различных пар воздействий (см. раздел «Алгоритмы работы») каждые 30 секунд.
2. Кратковременные нажатия на кнопку «ON/OFF» во включенном состоянии аппарата приводят к изменению установки таймера между значениями 5/10/15 мин. по циклу.
3. Нажатие на кнопку «MODE SELECT» приведет к остановке программы автоматического режима и (вне зависимости от текущего состояния) переходу к комбинации воздействий «COMPRESSION» + «HEAT». Для установки других воздействий нажмите на кнопку «MODE SELECT» необходимое количество раз (см. раздел «Алгоритмы работы»).
3. Для выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение 2-х секунд.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ**Рекомендации по продолжительности использования массажера****1. Снятие напряжения и усталости глазных мышц**

Массаж в течение 5 минут может полностью снять переутомление глазных мышц, уменьшить отечность век, понизить внутриглазное давление и улучшить кровообращение.

2. Уменьшение симптомов стресса и усталости (мешки и круги под глазами)
Массаж 2 раза в день в течение 30 дней способствует уменьшению мешков под глазами и темных кругов, возникающих в результате недосыпания, переутомления.

3. Улучшение функций головного мозга и нормализация сна
Массаж в течение 5 - 10 минут ежедневно перед сном способствует быстрому достижению фазы глубокого сна. Массажер можно применять при нарушении сна и бессоннице, вызванной невротическими или тревожными состояниями.

4. Уменьшение глубины морщин вокруг глаз и повышение эластичности кожи
Ежедневный массаж в течение 5 - 10 минут значительно повышает эластичность, обеспечивает выравнивание поверхности и цвета кожи, уменьшает глубину и количество морщин. Эффективность массажа повышается при применении специальных средств для кожи вокруг глаз.

5. Близорукость

Для устойчивого эффекта достаточно 3-х сеансов массажа в день по 5 минут. Это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма и повышению остроты зрения.

АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ

При включении питания аппарата по умолчанию активизируется автоматический режим работы с программным перебором различных пар воздействий каждые 30 секунд.



Во время воздействия его параметры могут быть изменены при помощи последовательного нажатия на одноименную кнопку.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При перемещении аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее одного часа перед началом его использования.

Запрещается включать аппарат, если маска не надета на голову (в режиме «COMPRESSION» подача воздуха в пневмоподушечки может привести к их повреждению, если маска не надета на голову).

Аппарат рекомендуется использовать в удобном положении, например полулежа. Не используйте массажер во время прогулок или при управлении автомобилем.

Перед проведением процедуры массажа следует снимать контактные линзы.

Не используйте массажер во время сна.

Использование массажера детьми младше 8 лет допускается только в присутствии и при постоянном контроле со стороны взрослых. Продолжительность использования не должна превышать 20 минут.

При использовании аппарата пожалуйста закрывайте глаза. Также держите глаза закрытыми в течение первых 1-3 минут после проведения процедуры, т.к. четкость зрения в этот период может быть пониженной. Это нормально и быстро проходит.

Запрещается использовать массажер в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Запрещается самостоятельно разбирать аппарат.

Оберегайте многофункциональную маску и гибкий соединительный шланг аппарата от воздействия острых, колющих и режущих предметов и предметов с высокой температурой.

Не погружайте маску аппарата в воду, не мочите и не стирайте части маски из ткани. При необходимости очистки поверхности используйте мягкую ткань, слегка смоченную спиртовым раствором или нейтральным моющим средством.

Используйте для питания аппарата только высококачественные щелочные (алкалиновые) батареи питания, Ni-MH аккумуляторы или сетевой адаптер. Перед подключением адаптера обязательно извлеките из аппарата батареи питания!

Вынимайте батареи из отсека питания перед длительными перерывами в использовании аппарата.

Не храните аппарат в местах с повышенной температурой, влажностью, под прямыми солнечными лучами.

Оберегайте аппарат от ударов и попадания воды или иных жидкостей внутрь корпуса блока управления или маски.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. При нажатии на кнопку «ON/OFF» массажер не включается (индикатор не загорается) – проверьте правильность установки и состояние батарей питания или сетевого адаптера.

2. Массажер работает с низкой интенсивностью – проверьте состояние батарей питания и, в случае их разряда, замените на новые.

3. Блок управления включен, но многофункциональная маска не работает, работает нестабильно или с нарушениями – проверьте гибкие соединительные шланги на отсутствие механических повреждений. При сохранении неисправности обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта аппарата.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

Перед обслуживанием аппарата обязательно выключайте питание.

Для очистки от загрязнений поверхности пневмоподушечек маски-очков используйте мягкую ткань, не оставляющую волокон, слегка увлажненную в спиртовом растворе.

Для очистки корпуса маски-очков и блока управления используйте мягкую ткань, увлажненную чистой водой или водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства.

Берегите аппарат от попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса блока управления и многофункциональной маски.

Внимание! Внутри блока управления и маски-очков не содержится частей, подлежащих обслуживанию.

Аппарат следует хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте. Не храните аппарат рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной влажностью.

Не оставляйте аппарат в местах, доступных для детей и домашних животных.

Перед длительными перерывами в использовании аппарата обязательно извлекайте батареи питания из блока управления.